



## 歩行サポート手すり スムーディの設置事例



スムーディには個別のニーズに対応できる3タイプがあります。各タイプの設置事例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

### 標準タイプ >>> 玄関先以外にもおすすめ

#### 事例① 玄関



**POINT**

行き帰り手すりをつかめるように手すりを置きたい。**住宅改修だと難しい**がスムーディなら対応できる


#### 事例② 縁側



**POINT**

**1本支柱**であることと、**ベース厚み1.3cm**の特長を活かして、縁側下の隙間にベースを差し込み、限られたスペースに設置

高さ調整ネジ

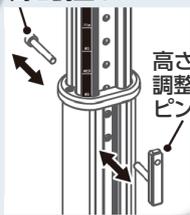

高さ調整ピン



**1本支柱なのにぐらつきが少ない**理由は高さ調整ネジとピンで固定しているからです。高さ調整時はピンで**仮止め**ができます!

### ステップタイプ >>> 狭い踏面に置く

ふみづら



#### 事例③ 玄関前の階段



**POINT**

階段の狭い踏面に置くコンパクトなステップベース

#### 事例④ 門扉前の階段



**POINT**

**門扉前**の狭いスペースにもステップベースなら設置可能

### スムーディの特長

手すり端部は握りやすく、**袖口が引っかかりにくい**形状



やさしい端部

手すりは上下左右**45度**ずつ調整可能




フレキシブルジョイント

支柱中央固定にすると、**片マヒ**の方も行き帰り**健側**で握れる



手すり伸縮タイプなら、設置の対応力アップ

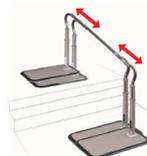

# ロングタイプ [1700/2050 / 2400/3460] >>> 階段が長いお家、段数の多い場所にも

## 事例⑤ 玄関の框～土間 (ロング2400)



### POINT

- ・段数の多い玄関に対応
- ・扉まで距離がある広い土間でも手すりを握りながら歩行できる


## 事例⑥ 広いポーチ (ロング2050)



### POINT


壁沿いに手すりを設置できない玄関前のポーチにも対応

## 事例⑦ 長いアプローチ (ロング3460)

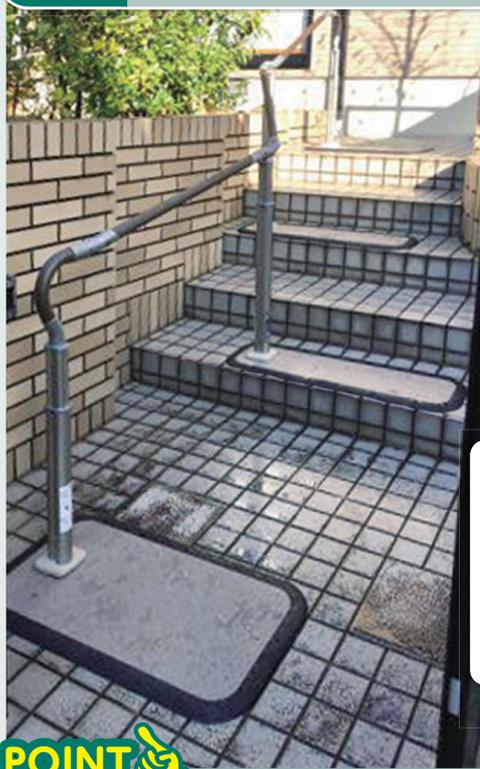

### POINT

- ・長いアプローチの下段～上段まで対応
- ・動線にあわせて左右45度まで角度調整可能
- ・レンタル手すりなので工事不要かつ短期間で簡単設置
- ・退院後すぐ使いたいときにも対応

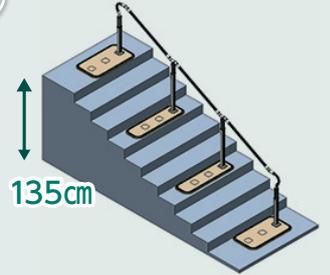


ロング3460タイプは最大段差135cm(9段相当)にも置ける

ベースはすべり止め加工を施しているので転倒しづらいです。1本支柱で、すっきりしたデザインも好評です!



## 標準ベースとステップベースの入れ替えが可能

商品別設置パターン可否はこちらよりご覧いただけます

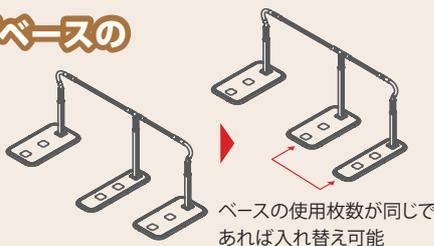

ベースの使用枚数が同じであれば入れ替え可能

## 手すり事例集No.2

スムーディ以外の手すり商品の設置事例は、**こちらの事例集**をご覧ください。



次回は

介護報酬改定についてご紹介します。

製造元

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部  
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

製品に関するお問合せ

☎ 0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00  
時間 | (土、日、祝日休み)

ご用命は

## 当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ スムーディの特徴をご紹介



▶ スムーディの設置・組立動画



▶ 2020年秋発売 新商品ご紹介動画はこちら



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

販売元



介護用品・福祉用具の流通にイノベーションを

株式会社 **ウェルファン**

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28番32号  
TEL050-2018-0954 FAX072-832-5412

このチラシの記載内容は2021年3月現在のものです。